


Folleto de información para el paciente

Sustituto óseo MyBone® Custom

Información del producto:

Modelo del producto	Sustituto óseo - producto personalizado Código CND : P.90.04.03 Productos no biodegradables, rellenos y reconstructivos
Marca	MyBone® Custom
Componente	Hidroxiapatita sintética
Fabricante legal	 Cerhum s.a PIMW - Bât.56 Rue des Pôles, 1 4000 Liège Bélgica www.cerhum.com

¿Para qué se utiliza MyBone® Custom?

MyBone® Custom es un injerto óseo específico para un paciente, diseñado de acuerdo con la descripción del cirujano y los datos de imágenes médicas (TAC, radiografías, RM).

MyBone® Custom está indicado para la reconstrucción ósea. Los defectos óseos pueden estar causados por lesiones traumáticas (como accidentes o caídas), enfermedades óseas, malformaciones congénitas o extirpación tumoral. Este producto sanitario también puede utilizarse con fines estéticos, por ejemplo, para aumentar el volumen óseo.

MyBone® Custom está diseñado para permanecer en su cuerpo de por vida. No está indicado para la reconstrucción de huesos en crecimiento.

Información de seguridad sobre el uso de MyBone® Custom:

Para un uso seguro del injerto óseo, debe seguir cuidadosamente las instrucciones suministradas por su profesional sanitario, ya que el nivel de atención necesario varía de un caso a otro.

Es importante que siga estas recomendaciones e informe a su profesional sanitario lo antes posible si experimenta dolor, enrojecimiento, exposición del implante, inflamación o infección en la zona implantada.

Deben evitarse los golpes en la zona implantada. Un fuerte golpe puede provocar complicaciones importantes, como la fractura del implante o la necesidad de cirugía adicional.

Evite cargas pesadas sobre el implante durante la fase de consolidación ósea (de 3 a 4 meses); de lo contrario, el implante podría fallar.

MyBone® Custom está hecho de hidroxiapatita, un compuesto totalmente compatible con la adquisición de imágenes médicas. De forma similar, usted no está en riesgo por someterse a una resonancia magnética. Sin embargo, asegúrese de informar al personal médico de que lleva el implante.

¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

Cualquier cirugía tiene riesgos y puede causar efectos secundarios como dolor, hinchazón, hemorragia, infección y hematomas.

En el caso de MyBone® Custom, pueden producirse los siguientes efectos secundarios:











- ausencia de consolidación, consolidación retardada o consolidación defectuosa entre el hueso natural y el implante
- infección superficial o profunda de la herida
- abertura de la herida
- exposición del implante
- nueva fractura
- osteomielitis (infección ósea)
- hematoma
- celulitis
- recurrencia de quistes

Es probable que estos efectos secundarios provoquen deformación o fallo del implante. También es posible experimentar molestias o cambios en la sensibilidad en la zona implantada.


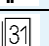





¿Cómo puede identificar su implante?

Recibirá una «Tarjeta de implante internacional» que contendrá toda la información necesaria para identificar su implante. El cirujano también escribirá información específica sobre su procedimiento.

Presente esta tarjeta a cualquier profesional sanitario que pueda solicitarla.

International Implant Card	
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	https://www.cerhum.com/
<p>en custom-made device - bone substitute fr dispositif sur mesure - substitut osseux nl hulpmiddel naar maat - botssubstituut de Sonderanfertigung - knochenersatz it dispositivo su misura - sostituto dell'osso pt dispositivo feito por medida - substituto ósseo ukr виготовлений на замовлення виріб - замітник кістки ro dispozitiv fabricat la comandă - substitut osos es producto a medida - sustituto óseo</p>	
	MyBone Custom
	MCUYYXXXXXX
	Cerhum s.a. Rue des pôles, 1 4000 Liège, BELGIUM

* Esta tarjeta es representativa y la información puede diferir dependiendo del país en el que se adquirió el implante.

	Nombre del paciente
	Fecha de implantación
	Nombre y dirección del centro sanitario
	Sitio web de información para el paciente
	Nombre del producto
	Número de lote
	Fabricante

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre MyBone® Custom:

póngase en contacto con mybone@cerhum.com

Cerhum, el logotipo de Cerhum y MyBone® Custom son marcas registradas de Cerhum sa. © Cerhum sa, 2022